

ニッカ卓上型 面シール方式

分包器

NS-21A / NS-117A / NS-137B



NIKKA MICRON COMPANY LIMITED

皆様に深く信頼されたニッカの分包器

調剤で歴史あるパッカー式分包器が、コンタミネーションの許されない
抗がん薬や麻薬調剤の分包に活躍します。


スピーディーで簡単な分包手順、面シールの美しい仕上がりで、
様々な施設にご採用いただいております。




面シール方式とは

一般的なパッカー式分包器のシールは直線式で
僅か1mm以下の細いシール幅であるために
散薬が漏れやすい最大の欠点があります。


弊社が開発した面シール方式分包器は、
上下左右それぞれのシール幅5mmを実現し、
パッカー式分包器の欠点を改善しました。

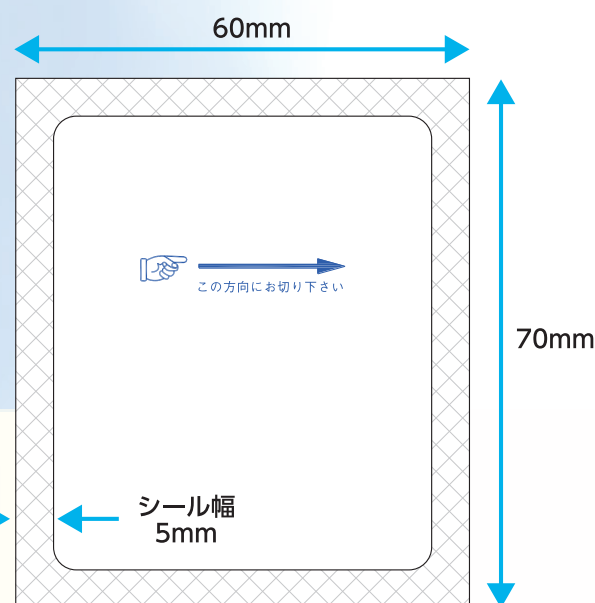

【DFS-230矢印 原寸大】

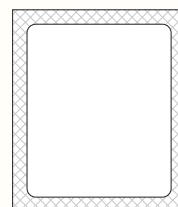

【DFS-230無地】
【DFS-255無地】

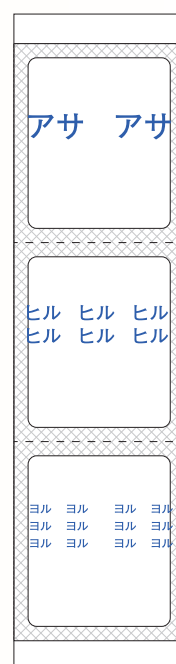

【DFS-230アサヒルヨル】

特 長

- ① **コンタミネーション(混薬)を防止します。**
物理的に薬剤が機器に接触しない構造のため、前の患者さんのお薬と
混ざる心配がありません。
- ② **シール幅が広く(5mm)薬剤漏れがありません。**
しっかりとした面シールにより、患者さんに安心してお薬を渡すことができます。
- ③ **わずらわしいテフロン、セロハンは一切不要です。**
消耗品は包装フィルム(二重巻き分包紙)1巻のみで、手間が省け、経済的です。
- ④ **予熱の必要がありません。スイッチONで即分包ができます。**
1日中予熱を入れて待機する必要がないエコな分包器です。
- ⑤ **中身が見えるため検薬に最適です。**
包装フィルムの片側に透明フィルムを採用しているため、検薬に適しています。
- ⑥ **耐久性に優れています。**
シンプルで頑強な構造は、多くのユーザー様から信頼をいただいております。

主なお奨め先 (10,000ヶ所以上の納入実績)

国公立病院・私立病院の病院薬局・調剤薬局／漢方薬局／一般診療所／動物病院／老健施設など



小型卓上分包器 NS-21A

ミニワイドパッカー

仕 様	型 式	NS-21A
	外 形 寸 法	W460 × D370 × H225mm (開口時 H540mm)
	重 量	約15kg
	開 閉 方 式	カムロック
	シ ー ル 方 式	面シール方式
	分 包 数	21包 以下任意
	薬 包 の 大 き さ	60 × 70mm
	最 大 包 装 容 量	約3g
	電 源	AC100V 50/60Hz
	シ ー ル 時 電 流	14A
	専 用 分 包 紙	DFS-230矢印/無地/アサヒルヨル

汎用卓上分包器 NS-117A

ワイドパッカー

仕 様	型 式	NS-117A
	外 形 寸 法	W555 × D420 × H260mm (開口時 H600mm)
	重 量	約32kg
	開 閉 方 式	マグネットクラッチ
	シ ー ル 方 式	面シール方式
	分 包 数	21包 以下任意
	薬 包 の 大 き さ	60 × 70mm
	最 大 包 装 容 量	約3g
	電 源	AC100V 50/60Hz
	シ ー ル 時 電 流	18A
	専 用 分 包 紙	DFS-230矢印/無地/アサヒルヨル



多容量卓上分包器 NS-137B

エルワイドパッカー

仕 様	型 式	NS-137B
	外 形 寸 法	W620 × D450 × H290mm (開口時 H650mm)
	重 量	約45kg
	開 閉 方 式	マグネットクラッチ
	シ ー ル 方 式	面シール方式
	分 包 数	21包 以下任意
	薬 包 の 大 き さ	70 × 80mm
	最 大 包 装 容 量	約5g
	電 源	AC200V 50/60Hz
	シ ー ル 時 電 流	12A
	専 用 分 包 紙	DFS-255無地

パウダーセーフティ

抗がん薬の粉末を安全に取扱うために設計された、特殊集じん装置装備の調剤ユニットで、曝露から調剤者およびその環境を保護します。またアドリアシン軟膏の調製等にもご使用いただけます。

特長

- ①薬塵は調剤台の周囲にある吸込みスリットから吸引され、装置内部のHEPAフィルターに捕集されます。
- ②作業エリアは陰圧のため、汚染空気が外部に漏れにくい構造になっており、調剤者およびその環境を保護します。
- ③弊社面シール方式分包器を装備し、作業庫内に電子天秤も設置可能なため、秤量から分包までの一連の作業を庫内で行うことができます。
- ④HEPAフィルターは前面より容易に交換できます。また垂直構造のフィルターを採用しており、交換時の薬塵の飛散も防止します。
- ⑤屋外排気用ダクトの取付けが可能です。(オプション)
- ⑥室内排気には活性炭フィルターを装備しています。(NCGY-1500のみ)

NCGY-1300



仕様 NCGY-1300

本体寸法	W1300 × D780 × H1900mm
作業庫内	W1140 × D550 × H950mm
作業台高	850mm
本体	鋼板製焼付塗装仕上げ
前面シャッター	4t強化ガラス
薬品棚	8t強化ガラス(高さ可変式)
作業台	SUS 304ヘアライン仕上げ
集塵要素	HEPAフィルター
集塵効率	0.3μ粒子 99.97%以上
処理風量	6m³/min
ファン	120Wツインシロッコ
照明灯	LED
対応分包器	ミニワイドバックー NS-21A
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	400W(分包器は含まず)

NCGY-1500



仕様 NCGY-1500

本体寸法	W1500 × D780 × H1900mm ※サイズオーダー可能です。(オプション)
作業庫内	W1350 × D550 × H950mm
作業台高	900mm
本体	鋼板製焼付塗装仕上げ
前面シャッター	4t強化ガラス
薬品棚	SUS製棚 (オプション)
作業台	SUS 304吸込みスリット仕上げ
集塵要素	HEPAフィルター
集塵効率	0.3μ粒子 99.97%以上
処理風量	24m³/min
ファン	200Wツインシロッコ、42Wクロスフローファン
照明灯	LED
対応分包器	エルワイドバックー NS-137B
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	400W(分包器は含まず)

※改良のため製品および仕様は予告なしに変更する場合があります。

製造発売元

無菌技術50年の専門メーカー



本社・医療事業部/〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田3-16-5 TEL.048-950-2371(代) FAX.048-950-2370
 札幌営業所/〒007-0836 札幌市東区北三十六条東15-1-103 TEL.011-733-3101(代) FAX.011-733-3102
 仙台営業所/〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-2-27 TEL.022-217-4421(代) FAX.022-217-4423
 名古屋営業所/〒452-0814 名古屋市西区南川町131番 TEL.052-509-1071(代) FAX.052-509-1072
 大阪営業所/〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-10-9 TEL.072-728-5513(代) FAX.072-728-5517
 福岡営業所/〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-1-14 TEL.092-627-2621(代) FAX.092-627-2620

ホームページ <http://www.nikkamicron.co.jp>

代理店